

Alligator SF Rampen Montage- und Gebrauchsanleitung



MOBILEX A/S
Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg
Dänemark
www.mobilex.dk

1. Einleitung

Sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich für ein hochwertiges Mobilex Produkt entschieden und darüber freuen wir uns sehr. Diese Gebrauchsanleitung enthält eine genaue Beschreibung des Produktes und wichtige Hinweise für dessen korrekten Gebrauch. Bitte lesen Sie daher vor Gebrauch des Produktes diese Anleitung sorgfältig durch. Beachten Sie bitte alle Anweisungen, besonders die Sicherheitshinweise und folgen Sie diesen jederzeit um einen sicheren und dauerhaften Einsatz des Produktes zu gewährleisten.

Zweckbestimmung

Mobilex-Rampen sind mobile und transportable Rampensysteme zum Befahren mit dem Rollstuhl. Sie ermöglichen die Überwindung von Höhenunterschieden mit oder ohne Fremdhilfe (z.B. Treppenstufen). Die Mobilex Rampen ermöglichen somit den Patienten, die aufgrund einer Mobilitätseinschränkung auf einen Rollstuhl angewiesen sind, ein Gebäude zu verlassen bzw. aufzusuchen und tragen somit zur Befriedigung der Grundbedürfnisse des Benutzers bei. Sie können im Außen- und Innenbereich angewandt werden.

Bei weiteren Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an Mobilex A/S

Mobilex A/S

Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg
Denmark

Phone: +45 87 93 22 20
Telefax: +45 87 93 17 77
E-Mail: info@mobilex.dk

2. Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie das Produkt nur in einwandfreien technischen Zustand
- Falls Sie irgendwelche Beschädigungen oder Fehler am Produkt vorfinden kontaktieren Sie bitte unverzüglich Ihren Händler
- Die Rampen dürfen maximal mit insgesamt 300 kg belastet werden .
- Beachten Sie die Angaben auf dem Produkt-Aufkleber
- Bitte nutzen Sie die Rampen nur für den vorgesehenen Einsatzbereich (siehe Zweckbestimmung)
- Die Rampen dürfen nur auf einer stabilen Bodenfläche verwendet werden
- Rampen dürfen maximal für folgende Höhenunterschiede verwendet werden:

SF-040	10 cm
SF-090	20 cm
SF-120	25 cm
SF-150	30 cm
- Beim Auseinander- oder Zusammenfallen der Rampen darauf achten keine Finger oder andere Körperteile einzuquetschen

3. Beschreibung

Produkt Beschreibung

Die Mobilex SF Rampen sind faltbare Rampen aus Aluminium mit einer rutschfesten Fahrbahnoberfläche aus Aluminiumsilikat.


Funktionsbeschreibung

Mobilex-Rampen finden bei Patienten Anwendung, die auf Rollstühle angewiesen sind. Sie sollen den Patienten die Überwindung von Höhenunterschieden mit oder ohne Fremdhilfe ermöglichen.

Lieferumfang

Die Mobilex SF Rampen werden in 1 Karton mit folgendem Inhalt geliefert:

- ✓ 1 Mobilex SF Rampe
- ✓ dieses Handbuch

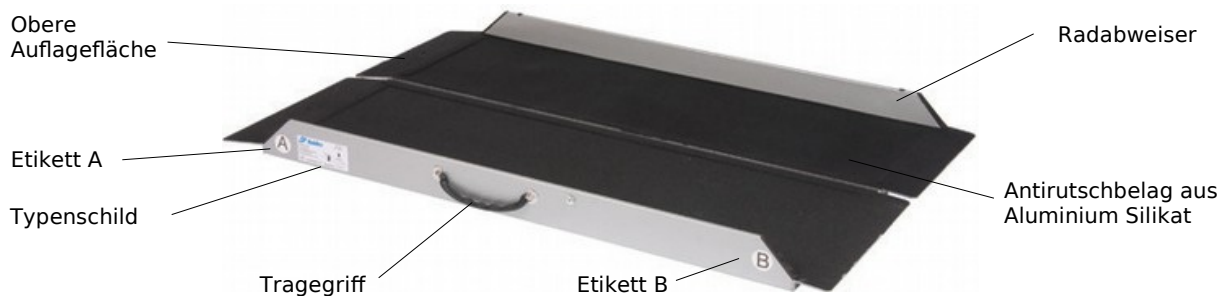

Aufstellungs- und Funktionsbeschreibung

- Die Rampen sind mit einem Etikett **A** und einem Etikett **B** ausgestattet
- Etikett **A** kennzeichnet die obere Seite der Rampe (die Seite die auf dem Hindernis liegt)
- Etikett **B** kennzeichnet die untere Seite der Rampe (die Seite die auf dem Boden aufliegt)
- Die Rampe darf nur auf einem ebenem und stabilen Untergrund verwendet werden
- Vor jeder Benutzung kontrollieren Sie dass die Rampe stabil liegt

Handhabung beim Transport

Die Mobilex SC-Rampen können für einen bequemen Transport in Längsrichtung zusammengeklappt werden und sind mit einem bequemen Tragegriff ausgerüstet

Zubehör

Für die Alligator SF Rampen ist kein Zubehör lieferbar.

4. Technische Daten

SF Rampen	SF-040	SF-090	SF-120	SF-150
Länge	40 cm	90 cm	120 cm	150 cm
Breite	71 cm	77 cm	77 cm	77 cm
Laufflächen Breite	71 cm	73 cm	73 cm	73 cm
Höhe Radabweiser	--	6 cm	6 cm	6 cm
Max. Steigung / Höhe	12° / 10 cm	12° / 20 cm	12° / 25 cm	12° / 30 cm
Gewicht	4 kg	8 kg	10,5 kg	12,5 kg
Max. Belastung	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Faltmasse cm (LxBxH)	45 x 37 x 5	90 x 40 x 10	120 x 40 x 10	150 x 40 x 10

Produkt-Aufkleber

Das Typenschild befindet sich außen am Radabweiser

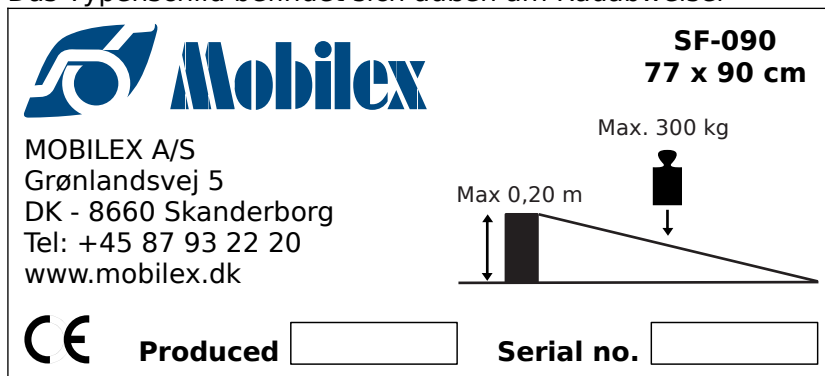


Abbildung des Typenschildes (nicht originales Beispiel)

5. Wartung und Pflege

Normale Verschmutzungen an Metall- und Kunststoffteilen lassen sich mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernen. Beachten Sie deren spezielle Produktinformation und verwenden Sie ausschließlich handelsübliche Reinigungsmittel, die für die Reinigung bzw. Desinfektion geeignet sind (keine Lösungs- oder Scheuermittel).

Trotz der stabilen Bauweise und der Verwendung von widerstandsfähigen Materialien unterliegt das Produkt einem gewissen Verschleiß. Es wird daher empfohlen, das Produkt in regelmäßigen Abständen von einem Fachmann kontrollieren zu lassen.



ACHTUNG! Die Gummilippe als Verbindung zwischen den zwei Rampenteilen ist ein Verschleißteil und muss vor jedem Gebrauch auf Risse oder Sprödigkeit kontrolliert werden. Es wird empfohlen bei Defekt oder im Zweifelsfall die Gummilippe auszutauschen.

6. Allgemeine Problembehebungen

Problembeschreibung	Mögliche Ursache	Problembehebung
Die Rampe klemmt beim Aus-einander- oder Zusammen-Falten	Die seitlichen Radabweiser könnten verbogen sein	Versuchen Sie die Radabweiser gerade zu biegen
Die Rampe lässt sich schwer Aus-einander- oder Zusammen-Falten	Schmutz an oder in den Scharnieren	Reinigen und ölen Sie die Scharniere

7. Entsorgung des Produktes

Das Produkt kann nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden sondern muss zur lokalen Müllentsorgungsstelle gebracht werden.

8. Garantie

Mobilex A/S bietet 2 Jahre Garantie auf Schäden die durch Produktionsfehler oder Materialfehler verursacht sind. Die Garantie erlischt bei nicht bestimmungsgemäßer Reparatur, Wartung oder Verwendung des Produkts. Teile mit normalem Verschleiß unterliegen nicht der Gewährleistung. Bei Produktänderungen ohne unsere schriftliche Zustimmung erlischt die CE-Kennzeichnung und unsere Produkthaftung. Im Falle von Produktschäden, die durch diese Garantie abgedeckt sind, benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler oder Mobilex A/S direkt. Die Garantie deckt keine Transportkosten und keinen Schadenersatz während der Reparatur und keinen Personenschaden. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Verletzungen oder andere Schäden, die auf Nicht-Einhaltung von der Gebrauchsanweisung zurückzuführen sind.

9. Konformitätserklärung (CE)

Die Firma Mobilex A/S, Grønlandsvej 5, 8660 Skanderborg, Dänemark erklärt hiermit, dass das Produkt

Mobilex Alligator SF Rampen

in Übereinstimmung mit der technischen Dokumentation entworfen und hergestellt wurde und folgende grundlegenden Anforderungen erfüllt:

- **Richtlinie des EU Rates 93/42/EWG**

Lars Nygaard
Geschäftsführer
Mobilex A/S



Skanderborg, am 30.06.2009

.....
Unterschrift