

Gebrauchsanleitung


Eiskralle 6-spike

Verwendungszweck:

Die Eiskralle dient der Erhöhung der Sicherheit von Personen, die auf stockartige Gehhilfen angewiesen sind, auf eis- oder schnee-glatten Gehwegen.


Montage:

Rohr \varnothing 16-20mm / M4x16mm
Schrauben sehr stark anziehen.
Für Rohr \varnothing 21/22mm M4x20mm
(nicht im Lieferumfang enthalten)

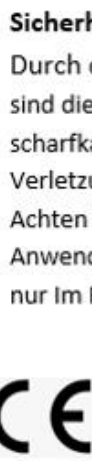

Bootcatcher GmbH
Rue Coulon 4
CH - 2000 Neuchâtel
Art. Nr. SC - 001a

Sicherheitshinweis:
Durch den Anwendungszweck sind die Krallen spitzig und scharfkantig, es besteht daher Verletzungsgefahr!
Achten Sie auf sicheres Einrasten.
Anwendung in unterer Position nur im Freien.

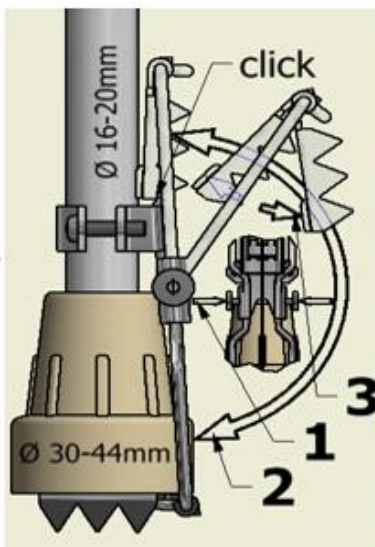

EISKRALLE

Crampon à glace
Ice grip

COMPACT

aus rostfreiem Inox Stahl
en acier inoxydable
in stainless steel

Mode d'emploi

Crampon à glace 6-1pike

Utilisation :


Le crampon à glace augmente la sécurité des personnes qui utilisent cannes ou cannes anglaise, sur des sentiers glacés ou enneigés.

Assemblage :

\varnothing bâton 16-20mm / M4x16mm
 \varnothing bâton 21/22mm *M4x20mm
(*pas inclus dans le contenu de la livraison)

Consigne de sécurité :

Les griffes sont, en raison du but d'utilisation, pointues et à angle vifs. Attention aux risques de blessures !
Vérifiez l'indexation.
Utilisation en position bas, seulement en plein air.

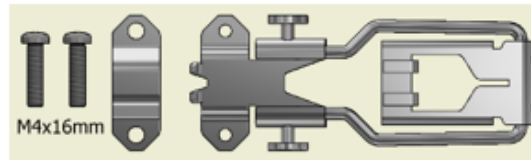

User instruction

Ice grip 6-spike

Purpose:

The ice grip is an accessory tool for canes and crutches to improve slip protection on snowy and icy surfaces.

Assembly:

Tube \varnothing 16-20mm M4x16mm
Tube \varnothing 21/22mm *M4x20mm
(*not included in the scope of supply)

Safety instructions:

Due to the using aim, the claws are pointed and sharp. Therefore, there is risk of injuries!
Make sure that the indexation is in locked status. Use the ice grip, in application function, only outside.

Gebrauchsanleitung in Farbe. Vorder- und Rückseite bedruckt. Sprachen d f e / 210x74mm

gefaltet auf 52.5x74mm

4 Stück / A4 Blatt / d.h. 250 Blatt für 1000 Eiskralle

Variante: schwarz weiss

