



Medline International Germany GmbH  
 Medline-Straße 1 - 3  
 47533 Kleve  
 Germany

Tel: +49 (0)2821-7510-0  
 Fax: +49 (0)2821 7510-7802  
[www.medline.com/de](http://www.medline.com/de)



## Technisches Datenblatt

# Aquapak® Luftbefeuchter mit Adapter

### Artikelnummern

AQUAPAK® steriles Wasser mit Befeuchteradapter						
Artikelnummer	Faßungsvermögen	Konfiguration	Überdruckventil	Anschluss des Adapters	Folgende Bestandteile sind enthalten:	Stück/Box
H00340CE	340 ml	Steriles Wasser	Ja	International	H00040CE	20
H00640CE	650 ml	Steriles Wasser	Ja	International	H00040CE	10
H00340FCE	340 ml	Steriles Wasser	Ja	Französisch	H00040FCE	20
H00640FCE	650 ml	Steriles Wasser	Ja	Französisch	H00040FCE	10

### Beschreibung

AQUAPAK® vorgefüllte Befeuchter sind medizinische Einweggeräte, die steriles Wasser für die Inhalationstherapie liefern und aus zwei Teilen bestehen: einem Befeuchterreservoir, das steriles Wasser enthält, und einem Adapter. Der Adapter wird direkt an ein Sauerstoffdurchflussmessgerät angeschlossen und arbeitet mit Durchflussraten zwischen 0,5 und 10 Litern pro Minute (LPM). Die Adapter sind mit einem akustischen Alarm (Druckbegrenzungsventil) ausgestattet, der den Benutzer auf Durchflussbegrenzungen oder Verstopfungen aufmerksam macht.

**Aquapak Sterile Wasser Eigenschaften:** 1 x Destilliert, entionisiert, entchlort, Doppelfilter über Millipore-Filter, nicht pyrogen, USP-Standard.

**Wasser-Sterilisationsverfahren:** aseptische Verarbeitung (A)

**Aquapak-Adapter:** sind in 2 Versionen erhältlich und ermöglichen den direkten Anschluss an den Flowmeter:

- 9/16 Zoll x 18 Gewinde (International)
- 12 mm x 1,25 Gewinde (Französisch)

**Sterilisationsverfahren für die Adapter:** Strahlung (R)

### Basismaterialien

Reservoir-Beutel: Polypropylen  
 Punktions Pin: Polystyrol  
 Adapter: Polypropylen  
 Ventil: Silikon

### Packfaktor

Bitte beziehen Sie sich auf die Tabelle

### Verpackung

Adapterbeutel: Tyvek oder Film  
 Behälter Außentasche: Beutel aus Polyethylen (PE)


### Hersteller

Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield Illinois, 60093 USA

### Qualitätsrichtlinien

Konform gemäß Medizinprodukte-Richtlinie 2017/745 Anhang XI Teil A  
 MPG Klasse: IIa steril

- Bitte lesen Sie das Etikett und die Gebrauchsanweisung des Produkts vor der Verwendung gründlich und aufmerksam durch.

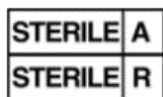

© 2023 Medline Industries LP oder eine ihrer Niederlassungen. Alle Rechte vorbehalten.  
 TDS\_Aquapak Humidifiers with Adaptors\_DE02

Revision: 9

Dokumententitel: FINT-441 - Technical

Dokumentnummer: EU1-00004-F-00025